

メタルブレード臼歯 レービングレードティース

日本で育った「レービングレードティース」はアメリカ・ヨーロッパ市場でも販売しています。

アメリカでの販売名称:LINGUAL BLADED TEETH



また生産も、日本国内からアメリカ・カリフォルニア州にあるアメリカン トゥース・インダストリー社(ブランド名: JUSTI)に移し、高い品質を保ってまいります。日本に於いては、今まで通り(株)東京歯材社が販売を行いますので、これからも宜しくお願い致します。



咬合力をクロスブレードに集中。

硬質レジン歯の上顎舌側咬頭に埋め込まれた金属。
これが強い破碎力を発揮させるクロスブレードです。

ブレードの先端に咬合力を集中させることで、噛む力が小さい高齢者の場合でも、効率よく咀嚼能力を高め、顎堤への負担を軽くします。永年の実績が証明する「噛める入れ歯」として、患者さんに説明しやすい機能的人工臼歯。上顎のリンガルブレードなので、開口時にブレードが見えにくく、審美的にも優れています。



レービングレードティース
LEVIN BLADED TEETH

咀嚼力を回復できる機能的な人工臼歯です。

義歯の咬砕力を増すことで顎堤への咬合圧の軽減を図り、顎堤を保護するために考案された義歯用人工臼歯です。上顎の第2小臼歯および第1、第2大臼歯の舌側咬頭は、金属製のクロスブレードでつくられています。このクロスブレードの先端に咬合力を集中させるため、小さな咬合力でも効率良く食べ物を噛み切ることができ、顎堤への咬合圧の負担を少なくすることができます。



コバルトクロムブレード歯 レービンブレードティース



- サイズ：Mタイプ(30m/m, 20°)
Sタイプ(28m/m, 33°)
- ビタシェード：A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、1組は上下顎臼歯16本入りです。

白金加金ブレード歯 販売終了 レービンブレードティース ゴールド




- ブレードに白金加金を用いた高品質のレービンブレードティースゴールドをご用意しました。よりグレードの高い義歯をお望みの患者さんに、きっと満足いただける美しい金色の輝きをもったブレードティースです。舌感もよく上質の義歯製作が可能です。
- ビタシェード：A1、A2、A3、A3.5、A4



特長

- [1] ブレードによる最大の咀嚼効率に加えて、天然歯の審美性を兼ね備えています。
- [2] ほとんどの臨床例に対して、両側性平衡咬合に排列できます。
- [3] 対合歯が舌側咬合あるいは無咬頭咬合に対しても使用できます。
- [4] 金属ブレードと硬質レジンから成り、色調はビタシェードでコバルトクロムブレード歯7色とゴールドブレード歯5色があります。

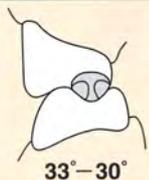

レービンブレードティースは対合歯に無咬頭歯、10度、20度、30度あるいは33度の解剖学的人工歯のどれにでも使用することができるため、ほとんどの臨床例に対して、容易に両側性平衡咬合に排列できます。

レービンブレードティース LEVIN BLADED TEETH

医療機器製造販売認証番号：223AKBZX00224000
医療機器の分類：管理医療機器(クラスII)

製造販売元 白水貿易株式会社

〒532-0033 大阪府淀川区新高1丁目1番15号

販売元 株式会社 東京歯材社

商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5 TEL.03-3874-5077
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20 TEL.03-3823-7501

製造元



AMERICAN TOOTH INDUSTRIES

MADE IN U.S.A.

1205SPR2